



株式会社 **アペル**

APEL Photoelectric colorimeter  
**MADE IN JAPAN**

# AP-120

光電比色計



## コンパクトで操作が簡単

### フィルター内蔵

5波長のフィルターが内蔵されています。

### 直接濃度表示

基準濃度を設定する事により、試料の濃度を直読できます。

### 安定性に優れた電子回路を採用

T=0% と T=100% をワンタッチでセットでき、  
マイクロプロセッサ制御により優れた安定性を実現しました。

### 高輝度LED使用

LED採用により光源は長寿命です。

### コンパクトで軽量

AP-120の重量はわずか0.8 kg です。

### 少ない検体量

わずか1.0 mL でも測定可能です。

外光を遮断




カバーにより外光の侵入を防ぎます

CE

# AP-120

光電比色計

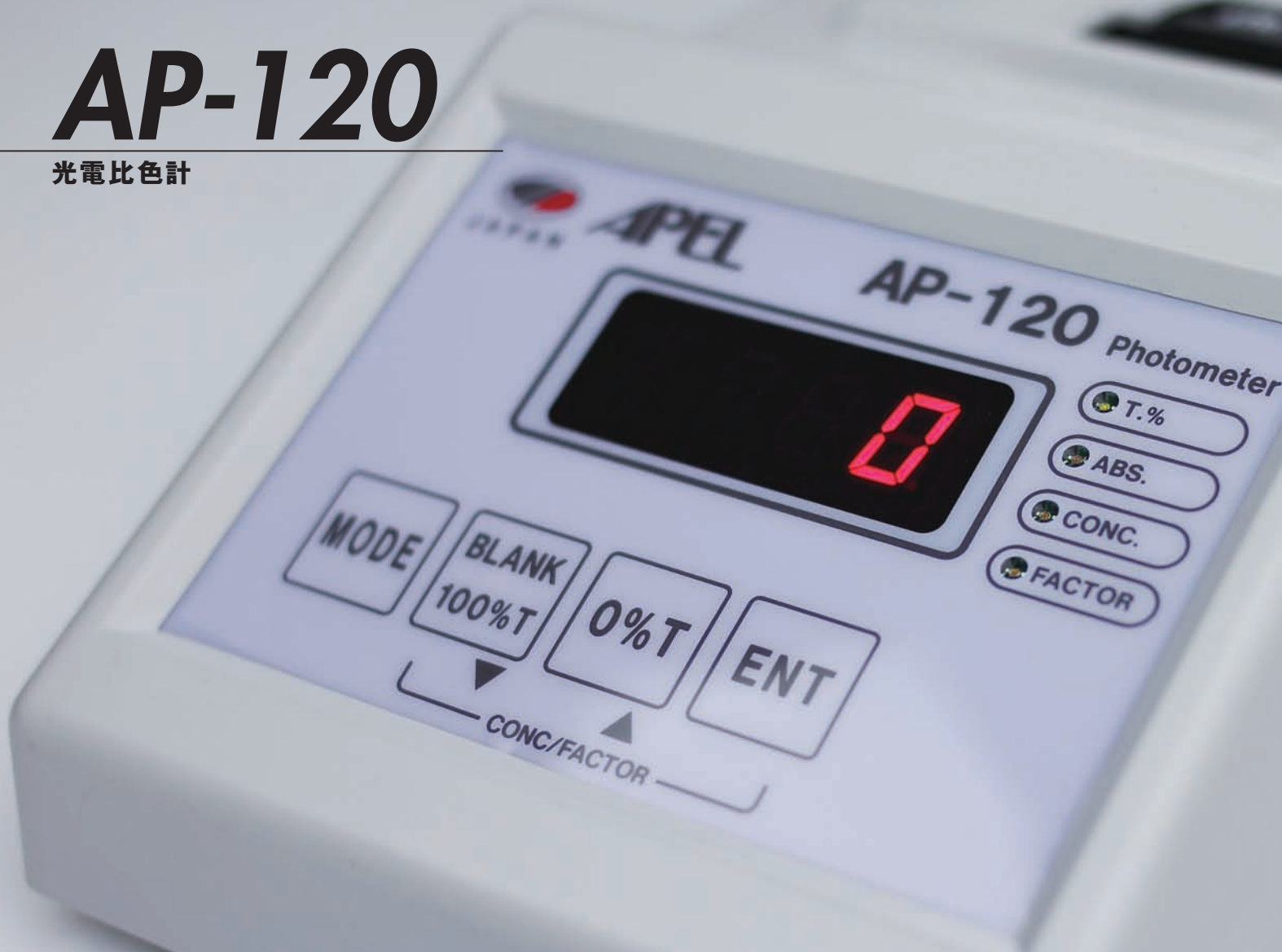

## 製品仕様:

ディスプレイ	3 1/2桁 7セグメントLED
内蔵フィルター(nm)	420 460 510 540 600
測定レンジ	吸光度 0~1.999 ABS
	透過率 0~105 %T
	濃度 0~1999 C(0.01~1999 F)
サンプル量	1.0 mL以上
光源	高輝度LED
オートゼロ機能	有り
電源	専用ACアダプター(100~240 VAC、50/60 Hz)
寸法	117(W)x185(D)x77(H)mm
重量	正味 0.8 kg(本体)

## 標準付属品:

角セル	2本
電源コード(ACアダプター付)	1セット
取扱説明書	1冊

※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。

MADE IN JAPAN



株式会社 **アペル**

URL <http://www.apel.co.jp/indexJ.html>

代理店