



HEMATOCRIT CENTRIFUGE

ヘマトクリット遠心機

HC-702




- Particularly designed for centrifugation of the samples in the capillary tubes.
- It can be used simply only by timer setup.
- A bold design change realized the large cost cut.
- The brake and the lid opening-and-closing button are attached, and safety is raised.
- A design is renewed, and while the outer case is made into plastic mold and is light-weighted, the surveillance window is also prepared in the upper part.
- 毛細管専用タイプです。
- タイマー設定のみで簡単に使えます。
- 大胆な設計変更により、大幅なコストダウンを実現しました。
- ブレーキや蓋開閉ボタンを付け安全性を向上させました。
- デザインを一新し、アウターケースをプラスチックモールドにして軽量化すると共に、上部に監視窓も設けました。




HEMATOCRIT CENTRIFUGE

ヘマトクリット遠心機 **HC-702**

- (1) Visual window
- (2) Cover
- (3) Manual safe lid button
- (4) Brake/run lamp
- (5) Power switch
- (6) Brake
- (7) Timer
- (8) AC power receptacle
- (9) Fuse

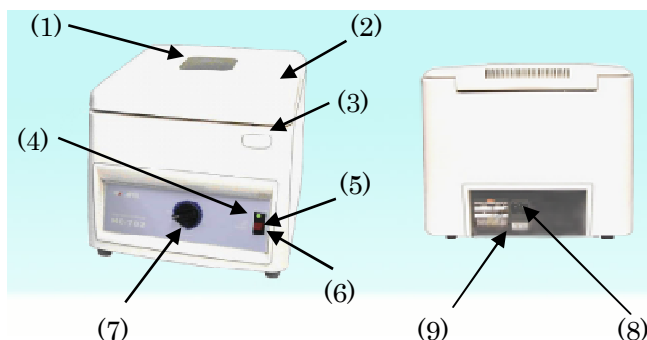

- (1) 監視窓
- (2) 蓋
- (3) 手動蓋開放ボタン
- (4) 状態表示ランプ
- (5) 電源スイッチ
- (6) ブレーキ
- (7) タイマー
- (8) 電源ソケット
- (9) ヒューズ

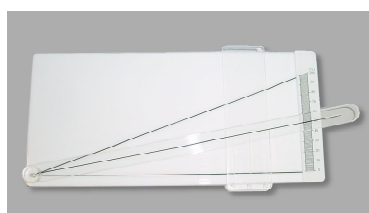

別売ヘマトクリットゲージ
Optional Hematocrit gauge

SPECIFICATIONS

Max. speed	12,000 rpm (Fixed)
Max. centrifugal force	15,000 x g
Max. Capacity	24-places
Safety device	Triple balance system
	Manual lid lock, lift cover and power cut off
	Fuse 110V/10A, 220V/5A
Timer	0 ~ 15min. (regressive type)
Brake System	Manual brake system
Power Requirement	110VAC or 220VAC 50/60Hz
Power Consumption	180W
Dimensions	290mmx320mmx245mm
Weight	Net 8kgs (main body)

仕様

最高回転数	12,000 rpm (固定)
最大遠心力	15,000 x g
架数	毛细管 x 24 本架
安全装置	トリプルバランスシステム
	手動蓋ロック、蓋開け時電源断
	ヒューズ 110V/10A, 220V/5A
タイマー	0 ~ 15 分 (復帰式)
ブレーキシステム	手動
電源	110VAC / 220VAC 50/60Hz
消費電力	180W
寸法	290mmx320mmx245mm
重量	正味 8kg (本体)

• Specifications and/or appearance subject to change without any prior notice.

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

MANUF.

製造元

APEL CO., LTD

株式会社 アペレ

URL: <http://www.apel.co.jp>

URL: <http://www.apel.co.jp/indexJ.html>

Distributor

代理店